

Косметология



Содержание



ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР CO2 BX300	3
Смарт режим для хирургического поля	3
Фракционный режим + LVR насадка	4-7
ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР CO2 REX-CO	9
Смарт режим для хирургического поля	10
Фракционная насадка+ LVR насадка	11
Лазер REX-Q-Switched Nd:YAG	14
REX-Q Краткое описание	
Длинноимпульсный Лазер Q-Switched Nd:YAG Rex Q PLUS	16
REX-Q Plus Краткое описание	

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР СО2 ВХ300

Смарт режим для хирургического поля

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

(В пластической и общей хирургии, дерматокосметологии, гинекологии, стоматологии, оториноларингологии)

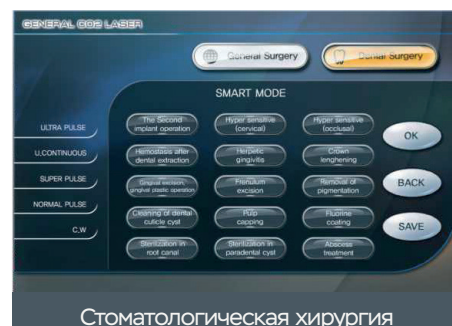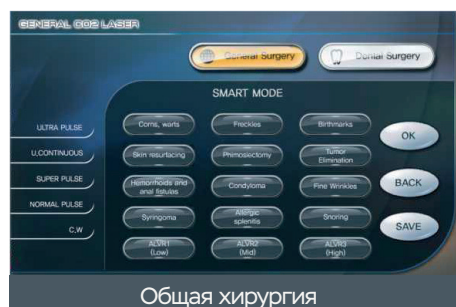

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР СО2 ВХ300

Фракционный лазер СО2 +LVR насадка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

Режим гинекологического лечения



Ручная LVR насадка



Автоматическая
LVR насадка

Хирургический режим




Хирургическая
насадка 50



Хирургическая
насадка 100



Стоматологическая
насадка

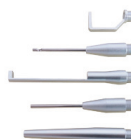


Насадка для лор-
практики



Фракционный режим




Фракционный режим

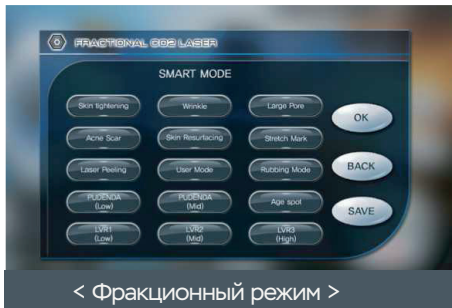



Разнообразные формы лучей

- Насадки для разных площадей обработки

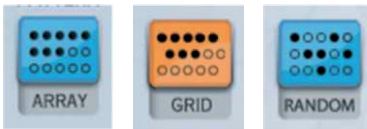


Основное применение в фракционной хирургии

Подтяжка кожи	Морщины	Расширенные поры	Послеугревые рубцы
Омоложение	Растяжки	Лазерный пилинг	Лазерная шлифовка кожи
Половые органы	LVR		

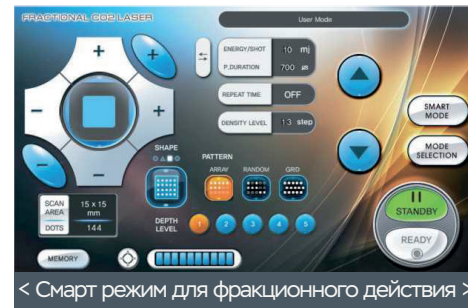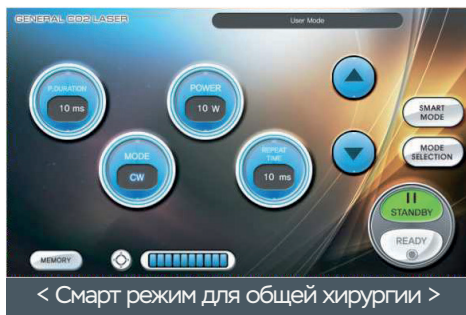

Режим луча Ultra-сканирование сводит к минимуму термальные повреждения и побочные эффекты

Омоложение кожи

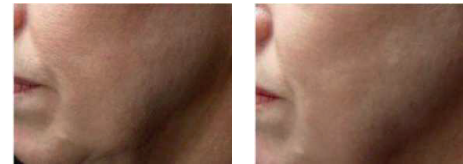

Большие поры



Угри



Морщины



До

После


Фракционная насадка + LVR насадка




Фракционная насадка (для лечения половых губ)






Смарт протокол для LVR ручной обработки

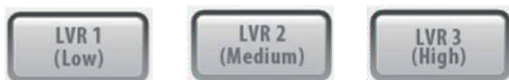

Фракционная насадка + авто насадка для вагинального омоложения

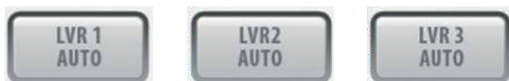

Как это работает?

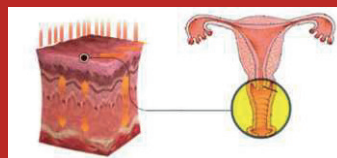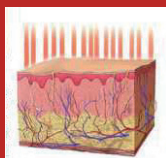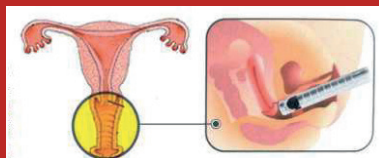

Лазерный луч высокой плотности обеспечивает широкое проникновение во влагалище и делает подтяжку и омоложение влагалища.

Гинекология Проктология



- Интимное омоложение;
- Подтяжка интимных мышц;
- Репродукция вагинальной секреции;
- Быстрое коллагеновое моделирование вагинальной ткани;
- Утолщение стенок влагалища;
- Предотвращение воспалительных заболеваний;
- Уменьшение диспареунии;
- Ремиссия недержания мочи;
- Геморрой и анальные свищи;
- Кондилома;

Стоматология



- Вторая операция по имплантации;
- Гиперчувствительный (цервикальный);
- Гиперчувствительный (окклюзионная поверхность);
- Гемостаз после удаления зубов;
- Герпетический гингивит;
- Наращивание коронки;
- Иссечение десен, операционная пластика десен;
- Иссечение уздечки;
- Лечение дельтальной кисты;
- Запайвание кровеносных сосудов;
- Покрытие фтором;
- Стерилизация в корневом канале;
- Стерилизация пародонтального кармана;
- Лечение абсцесса;

Лор практика



- Храп;
- Аллергический ринит;

! РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ НАСАДКАМИ LVR (ОПЦИИ)

Насадка гинекологическая: Автоматическая и ручная (опции)

С ручной насадкой LVR, оператор должен обрабатывать зону один за другим, но автоматическая насадка LVR, как только оператор вводит запрошенную информацию, он обрабатывает автоматически.

Технические характеристики

Модель	ВХ300	
Тип лазера	Лазер CO2	
Длина волны	10 600 нм	
Мощность	1-40 Вт	
Функция		
Направляющий луч	Диодный лазер 650 нм (5 мВт): 1-10 шагов	
Хирургический режим	Тип насадки	50 мм, 100 мм (основная) Насадка для лор и стоматологии (опция)
	Режим работы лазера	1.CW 2.Normal Pulse 3.Super Pulse 4.Super Pulse Continuous 5.Ultra Pulse 6.Smart Protocol (общая хирургия/ стоматологическая хирургия)
	Длительность импульса	- Ultra Pulse: 90-900 мкс - Super Pulse: 1~4мс Стандартное сканирование: 5-20 мс
	Время повтора	ВЫКЛ, 2 мс / 500 мс регулируемый, 5 мс, 10 мс, 30 мс, 50 мс, 70 мс, 100 мс, 250 мс, 500 мс
	Режим Луча	Ultra Pulse
Фракционный режим	Плотность	1-23 уровня (х, у оси); 9-4489 точек
	Режим работы	Фракционный режим Смарт Протокол
	Разнообразные формы лучей	Array, Spray, Random
	Зона сканирования	2×2 мм - 20×20 мм
	Форма луча	
	Глубина	1-5 шагов
	Насадка	- Фракционная насадка (гальванический мотор) - Насадка для лазерного интимного омоложения (опция)
	Время повтора	ВЫКЛ, 0.5, 1.5, 2, 2.5 мс
Основные характеристики		
Требования по электропитанию	220-240VAC 7A, 50/60Гц	
Система охлаждения	Водяное охлаждение	
Габариты	440x530x1870	
Вес	52 кг	
Экран	10,2 дюйма сенсорный цветной экран	

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР CO2 REX-CO

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

(общая хирургия, стоматологическая хирургия)




Основное применение в общей хирургии

Кожные наросты, бородавки и т. д.	Веснушки
Родимые пятна (родинки)	Омоложение кожи
Геморрой и анальные свищи	Удаление опухоли
Кондилома	Мелкие морщины
Храп	Сиринома


Основное применение в стоматологии

Вторая операция по имплантации	Гиперчувствительность
Гемостаз после удаления зубов	Герпетический гингивит
Наращивание коронки	Иссечение уздечки
Иссечение десен, операция пластическая десен	Лечение дентальной кисты
Удаление пигментации	Защитное покрытие пульпы - Покрытие фтором
Аллергический ринит	Стерилизация пародонтального кармана
Стерилизация в корневом канале	Лечение абсцесса

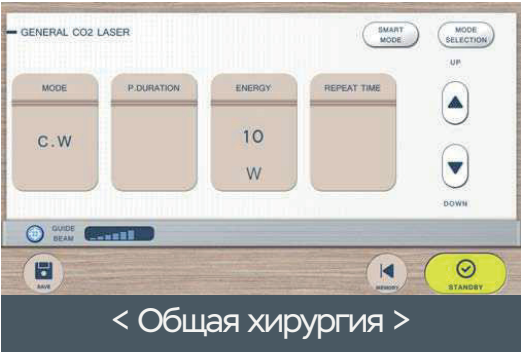

Смарт режим для хирургического поля

(общая хирургия, стоматологическая хирургия)

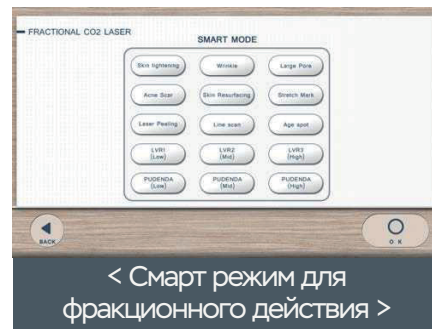

Разнообразные формы лучей
· Насадки для разных площадей обработок




Основное применение
в фракционной хирургии

Подтяжка кожи	Морщины	Расширенные поры	Послеугревые рубцы
Омоложение	Растяжки пилинг	Лазерный шлифовка	Лазерная кожи
Половые органы	LVR		



Режим луча Ultra-сканирование
сводит к минимуму термальные повреждения и побочные эффекты


Омоложение кожи

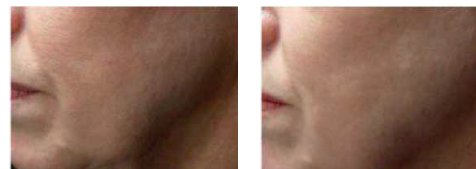

Большие поры



Угри

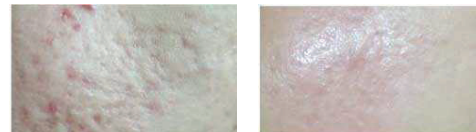


Морщины



До

После


Фракционная насадка + LVR насадка

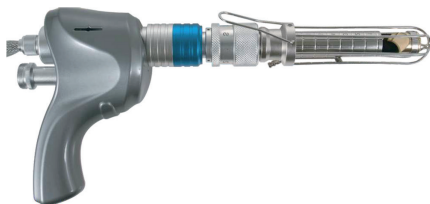


Фракционная насадка (для лечения половых губ)






Смарт протокол для LVR ручной обработки

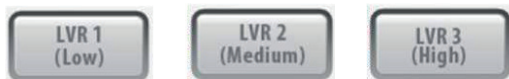

Фракционная насадка + авто насадка для вагинального омоложения

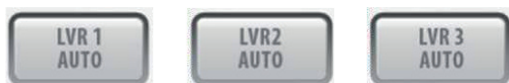

Как это работает?

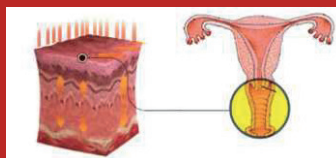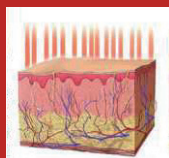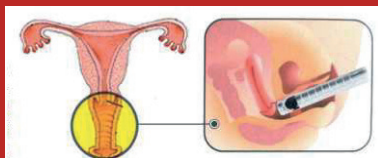

Лазерный луч высокой плотности обеспечивает широкое проникновение во влагалище и делает подтяжку и омоложение влагалища.

ФРАКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР CO2 REX-CO

Фракционный лазер +LVR насадка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

Режим гинекологического лечения



Ручная LVR насадка



Автоматическая
LVR насадка

Хирургический режим



Хирургическая
насадка 50



Хирургическая
насадка 100



Насадка для
лор-практики

Стоматологический режим



Фракционный режим



Технические характеристики

Модель	REX-CO	
Тип лазера	Лазер CO2	
Длина волны	10 600 нм	
Мощность	1-40 Вт	
Функция		
Направляющий луч	Диодный лазер 650 нм (5 мВт): 1-8 уровней	
Хирургический режим	Тип насадки	50 мм, 100 мм (основная) Насадка для лор и стоматологии(опция)
	Режим работы лазера	1. CW; 2. Стандартное сканирование; 3. Super - сканирование; 4. Super постоянное сканирование; 5. Ultra - сканирование; 6. Смарт Протокол (Общая /Стоматологическая Хирургия)
	Длительность импульса	■ Ultra - сканирование: 90-900 мс ■ Super - сканирование: 1.0-4.5 мс Стандартное сканирование: 5-20 мс
	Время повтора	Выкл, 2 мс / 500 мс регулируемый 5 мс, 10 мс, 30 мс, 50 мс, 70 мс, 100 мс, 250 мс, 500 мс
	Режим Луча	Ultra - сканирование
Фракционный режим	Плотность	0.2-2.6 шагов(х,у ось): 9-4489 точки
	Режим работы	Фракционный режим
	Разнообразные формы лучей	Array,Spray, Random
	Зона сканирования	2×2 мм - 20×20 мм
	Форма луча	■▲◆●
	Глубина	1-5 уровней
	Насадка	■ Фракционная насадка(гальванический мотор) ■ Насадка для лазерного интимного омоложения(опция)
	Время повтора	Выкл, 0.2,0.5,0.7,1.0,1.5,2.0 сек
Основные характеристики		
Требования по электропитанию	220-240VAC5A, 50/60Гц	
Система охлаждения	Воздушное охлаждение	
Габариты	520(Ш)×390(Д)×1700(В)мм	
Вес	60 кг	
Экран	10,2 дюйма сенсорный цветной экран	

Лазер REX-Q-Switched Nd:YAG

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

Обеспечивает высокую выходную мощность до 1.8-Дж при 1064 нм.

REX-Q обеспечивает удовлетворительные результаты благодаря эффективному устранению практически всех проблем с пигментами. Избирательно удалить конкретные пигменты с незначительным повреждением дермы и эпидермиса.

Режим РТР позволяет уменьшить боль и быстро восстановить кожу.

Применение

Тонирование

- Мелазма - Невус Ота - Родимые пятна - Морщины
- Поствоспалительная гиперпигментация кожи

Режим - Genesis

- Genesis использует режим РТР,
- Стимулирует фиброзные клетки кожи для быстрого омолаживания.

585нм (насадка для красителя)

- Сосудистые поражения
- Прилив крови
- Мелазма
- После угревая кожа
- Воспалительные угри

Насадка

- Фокусная насадка (2 ~ 10 мм, стандартный)
- Фракционная насадка для 532 нм / 1064 нм (опция)
- Насадка для красителя (585 нм / 595 нм, опция)
- Насадка для красителя (650 нм / 660 нм, опция)

Режим РТР

- Меньше боли, эффективен против многих пигментных поражений
- Скорейшая регенерация кожи, минимальный бесполезный урон
- Меньше поствоспалительной гиперпигментации кожи и других побочных эффектов,

Плоский профиль пучка Top-Hat

Излучает постоянную и равномерную энергию к точке обработки

Карбоновый пилинг

- Карбоновый пилинг путем удаления омертвевших клеток кожи с помощью углеродного крема.
- : Большие поры, прыщи, отбеливание кожи.
- Лечение пигментных повреждений
- Родимые пятна
- Себорейный кератоз
- Возрастные пятна
- Солнечное/Симплексное Лентиго
- Тату
- Невус Ота
- Синий приобретённый билатеральный Невус Ота-подобных пятен

650нм (насадка для красителя)

- Пигмент эпидермальный
- Веснушки



Клиническая картина

Тату
удаление



Неvus
Опа



Пигментные
пятна



До

После

Q-Switched Nd: YAG лазер обеспечивает высокую
выходную мощность
до 1.8-Дж при 1064 нм.

ХОРОШИЙ ВЫБОР, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СТРУКТУРУ КОЖИ

«REX-Q» - лучший выбор для достижения результата
лечения всех видов пигментированных поражений кожи.

Длинноимпульсный Лазер Q-Switched Nd:YAG Rex Q PLUS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AMI Inc., Республика Корея

Клиническая картина

Удаление
волос



Вены ног



Телеангио
эктазия



До

После





REX-Q^{Plus}

Q-Switched & Длинноимпульсный
Nd:YAG Лазер (2 в 1)

Рентабельный лазер с роскошным дизайном

Оптимизированная технология
делает идеальный режим Top-Hat

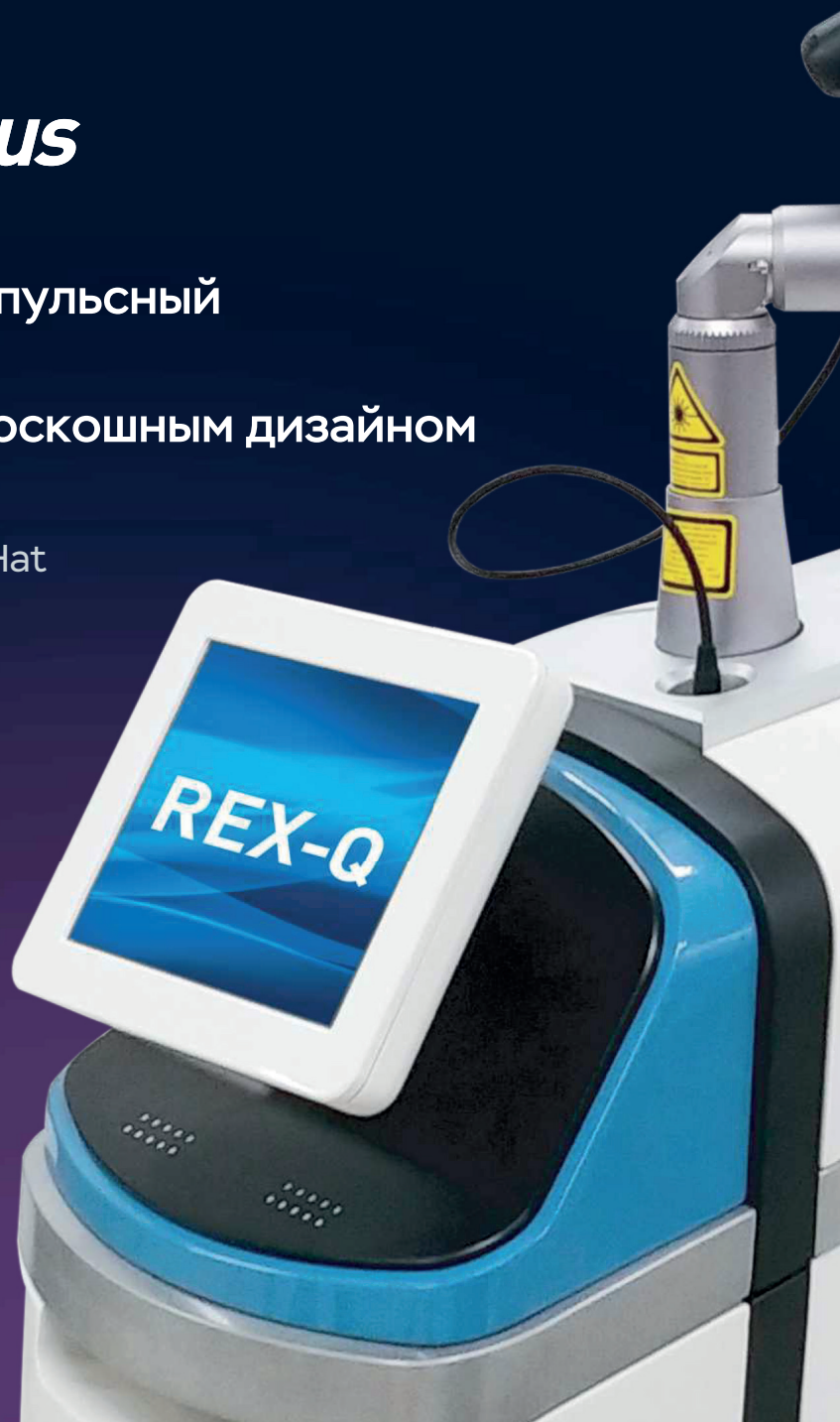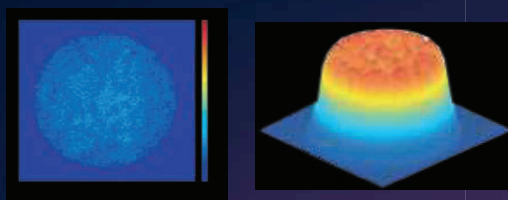

REX-Q Технические характеристики

Наименование		Q-Switched Nd: YAG Laser
Длина волны		1064нм/532нм 585нм/595нм/650нм/660нм
Режим работы		Режим 1064нм/режим 532нм Режим 585нм/режим 595нм Режим 650нм/режим 660нм Режим -Genesis
Энергия импульса	1064нм (одиночный)	Макс. 1,0 Дж
	1064нм (двойной)	Макс. 1,8 Дж
	1064нм (Genesis)	Макс. 2,3 Дж
	1064нм (Эпиляция)	Макс. 50 Дж
	532нм (одиночный)	Макс. 500 мДж
	532нм (двойной)	Макс. 500 мДж
	585нм / 595 нм (краситель)	Макс. 250 мДж
	650нм/ 660 нм (краситель)	Макс. 150 мДж
Ширина импульса		5-6 нс (1064нм/532нм) 330 мкс (Genesis)
Размер пятна		2-10 мм (1064нм/532нм/Genesis) 2 мм (585нм/650нм) 3 мм (595нм/660нм)
Частота пульса		1 -10 Гц (1064нм/532нм/Genesis)
Направляющий луч		Диод 635нм
Опциональная насадка		Насадка для тату (585нм/595нм/650нм/660нм) Фракционная насадка

REX-Q Plus Технические характеристики

Наименование		Q-Switched & Long Pulsed Nd: YAG Laser
Длина волны		1064нм/532нм 585нм/595нм/650нм/660нм
Режим работы		Режим 1064нм/режим 532нм Режим 585нм/режим 595нм Режим 650нм/режим 660нм Режим -Genesis/режим эпиляции
Энергия импульса	1064нм (одиночный)	Макс. 1,0 Дж
	1064нм (двойной)	Макс. 1,8 Дж
	1064нм (Genesis)	Макс. 4.5 Дж
	1064нм (эпиляция)	Макс. 50 мДж
	532нм (одиночный)	Макс. 50 мДж
	532нм (двойной)	Макс. 500 мДж
	585нм/595нм (краситель)	Макс. 250 мДж
	650нм/660нм (краситель)	Макс. 150 мДж
Ширина импульса		5-6нс(1064нм/532нм) 330 мкс (Genesis) 5-30 мс (Эпиляция) 1 -10 Гц (1064нм/532нм/Genesis) 1 -3 Гц (Эпиляция)
Размер пятна		2-10мм (1064нм/532нм/Genesis) 2мм (585нм/650нм) 3мм (595нм/660нм) 11-15 мм (Эпиляция)
Частота пульса		1-10Гц
Направляющий луч		Диод 635нм
Опциональная насадка		Насадка для тату (585нм/595нм/650нм/660нм) Фракционная насадка



www.ordamed.kz

E-mail: info@ordamed.kz

Call-center: 8 800 0707072

Подписывайтесь на нас:  / [ordamed.kz](https://www.facebook.com/ordamed.kz)  / [ordamed.kz](https://www.instagram.com/ordamed.kz)  / [ordamed.kz](https://vk.com/ordamed.kz)